



DASIT MANAGEMENT SYSTEM

**OGNI GIORNO AL VOSTRO FIANCO
NELLA GESTIONE
DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE**



DASITGROUP



**DASIT
DIAGNOSTICA**

DASIT MANAGEMENT SYSTEM

**OGNI GIORNO AL VOSTRO FIANCO
NELLA GESTIONE
DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE**

D

ASIT Management System (DMS) consente al moderno laboratorio di dotarsi di un software per completare la propria struttura operativa ed aumentarne l'efficacia.

L'evoluzione di DMS si esprime oggi attraverso una serie di configurazioni con valori specifici per ogni area analitica, partendo da una struttura generale che assicura in ogni ambito l'impostazione di regole di controllo, gestione ed archiviazione dei dati memorizzati e delle attività svolte.

La struttura completa di DMS, viene definita di volta in volta sulla base del numero di sistemi coinvolti e delle esigenze di ogni laboratorio comprensiva, se necessario, di connessione di altra strumentazione.

DMS EMATOLOGIA

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL'AREA DI **MONITORAGGIO EMATOLOGICO**

- Correzione della formula leucocitaria strumentale con quella effettuata al microscopio dall'operatore
- Dati q-flag disponibili anche nello storico campione
- Visualizzazione simultanea delle carte di controllo di tutti gli analizzatori collegati

DMS URINE

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL'AREA DI **ANALISI URINE**

- Integra in un'unica piattaforma i dati analitici di Chimica Secca, Sedimento e Dosaggio delle Proteine Specifiche
- Gestisce più profili di analisi per campione, come l'analisi dell'Esame Completo delle Urine e lo Screening delle batteriurie
- Mediante specifica applicazione consente elaborazione dei dati colturali ed epidemiologici per i campioni positivi allo screening delle batteriurie con Sistema per Sedimento Urinario Sysmex


DMS COAGULAZIONE

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL'AREA DI **COAGULAZIONE**

- Tracciabilità dell'ultima posizione strumentale dei campioni
- Esecuzione di test di default per query verso LIS fallita o per errore barcode
- DMS terrà traccia degli esami fatti e da fare indipendentemente dal giorno in cui vengono caricati a bordo macchina ed indipendentemente dalle caratteristiche del LIS

DASIT MANAGEMENT SYSTEM

OGNI GIORNO AL VOSTRO FIANCO
NELLA GESTIONE
DELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE

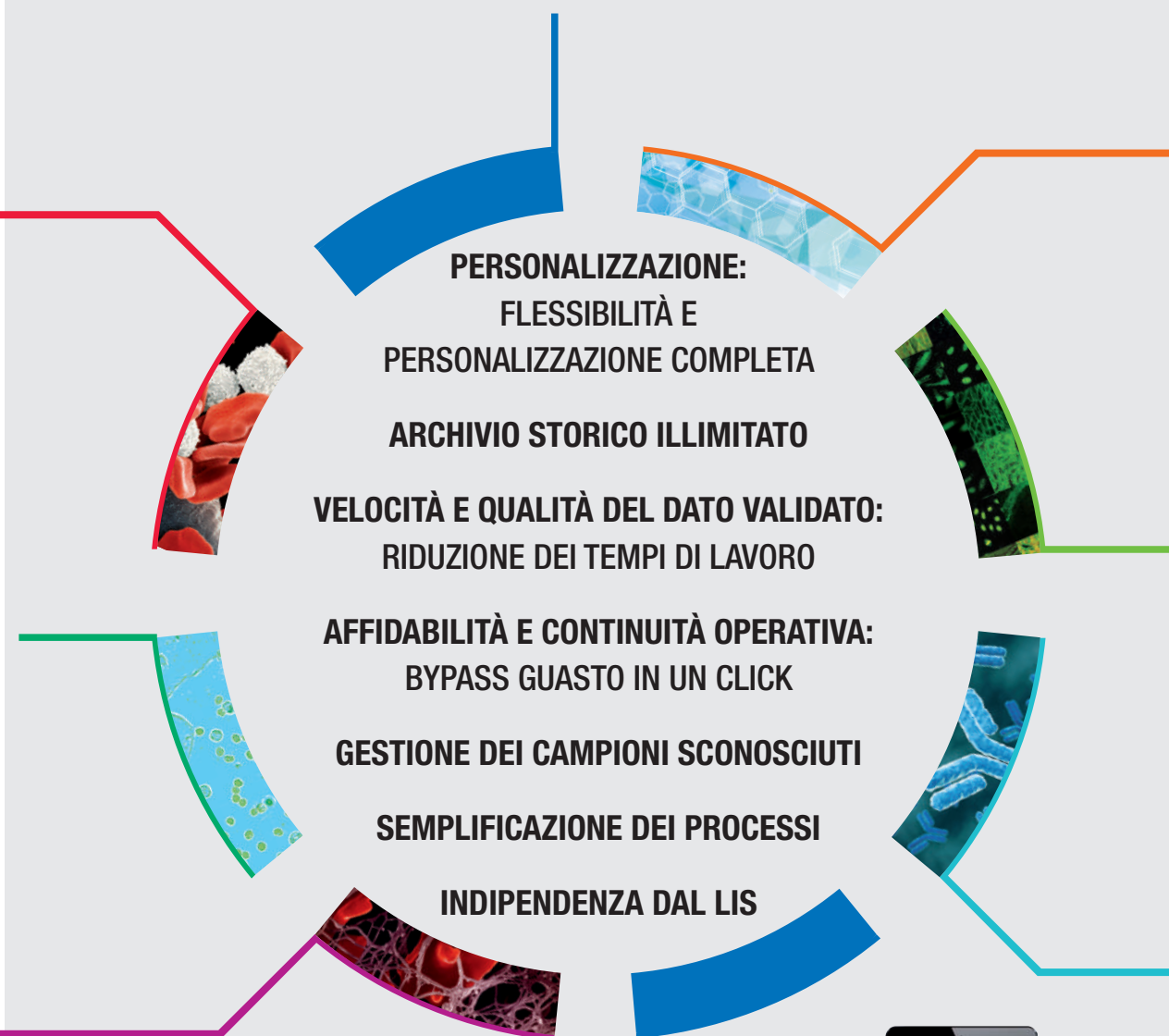

DMS WEB

COME **CONSULTARE E VALIDARE** I RISULTATI ANALITICI
DA UNA POSTAZIONE REMOTA

DMSWEB è un modulo che abilita per ogni DMS presente in laboratorio la possibilità di validare e consultare i risultati analitici da una postazione remota tramite un browser, quindi da qualsiasi postazione, computer, mac o tablet in rete.

Permette di avere in un "unico database virtuale" i dati storici che risiedono nei vari laboratori ma si consultano come se fossero tutti in un unico grande database.

Tutto questo con lo stesso stile dei DMS mantenendo la specificità della videata di validazione di ogni DMS ma aggiungendo la gestione multilaboratorio.



DMS CHIMICA CLINICA

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL'AREA DI **CHIMICA CLINICA**

- Garantisce la tracciabilità del dato analitico
- Integra in un'unica piattaforma i risultati di più analizzatori
- Fornisce regole personalizzabili a supporto della validazione ed interpretazione dei dati strumentali
- Ottimizza i collegamenti al LIS del laboratorio
- Consente inoltre di integrare i dosaggi urinari con i dati dell'esame completo delle urine

DMS AUTOIMMUNITÀ'

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL'AREA DI **AUTOIMMUNITÀ**

- Archivio delle cartelle cliniche con i risultati qualitativi e quantitativi dei test immunoenzimatici EIA e i profili fluoroscopici dei test di immunofluorescenza IFA
- Connessione fino a 3 strumenti diversi (es. analizzatore EIA, preparatore di vetrini IFA, preparatore di Dot Blot)
- Gestione dei flussi di lavoro con l'applicazione di regole esperte e proposta all'Operatore dei test da eseguire, in funzione dei risultati ottenuti in sequenza
- Gestione della sieroteca, con informazioni di stoccaggio e funzione di selezione ed eliminazione dei campioni
- Acquisizione delle immagini da microscopio, mediante fotocamera digitale per archiviazione, introduzione nei referti ed esportazione

DMS IMMUNOMETRIA

CONFIGURAZIONE DEDICATA ALL'AREA DI **IMMUNOMETRIA**

- Consente di collegare fino a 3 strumenti Kryptor al LIS di laboratorio
- Integrazione del software SSDWLab con trasferimento di anagrafiche, dati biochimici ed ecografici per il calcolo del rischio delle Trisomie 21, 18 e 13
- Protocollo esteso per ricezione e invio dei dati anamnestici
- Gestione prioritaria dei campioni urgenti
- Interpretazione e gestione flag strumentali
- Referto personalizzabile con loghi ed elementi stampabili e rappresentazione grafica del rischio

**DASIT DIAGNOSTICA
È DA SEMPRE VICINA
ALLE ESIGENZE
DEI PROPRI
UTILIZZATORI CON
PRODOTTI E SERVIZI
DI ECCELLENZA**

Pronto Dasit: punto di accesso per gli utilizzatori di strumentazione Dasit con servizio di assistenza tecnica e specialistica.

Supporto Specialistico Territoriale: ogni giorno al fianco dell'utilizzatore nella gestione e personalizzazione della strumentazione.

Formazione: Directa è l'impegno tangibile di Dasit nella formazione e aggiornamento del professionista di laboratorio. Percorsi di approfondimento dedicati permettono una visione a tutto tondo degli aspetti tecnici e clinici dell'attività di laboratorio.

