


UC-3500

Analizzatore completamente automatico
per l'analisi chimico-fisica delle urine

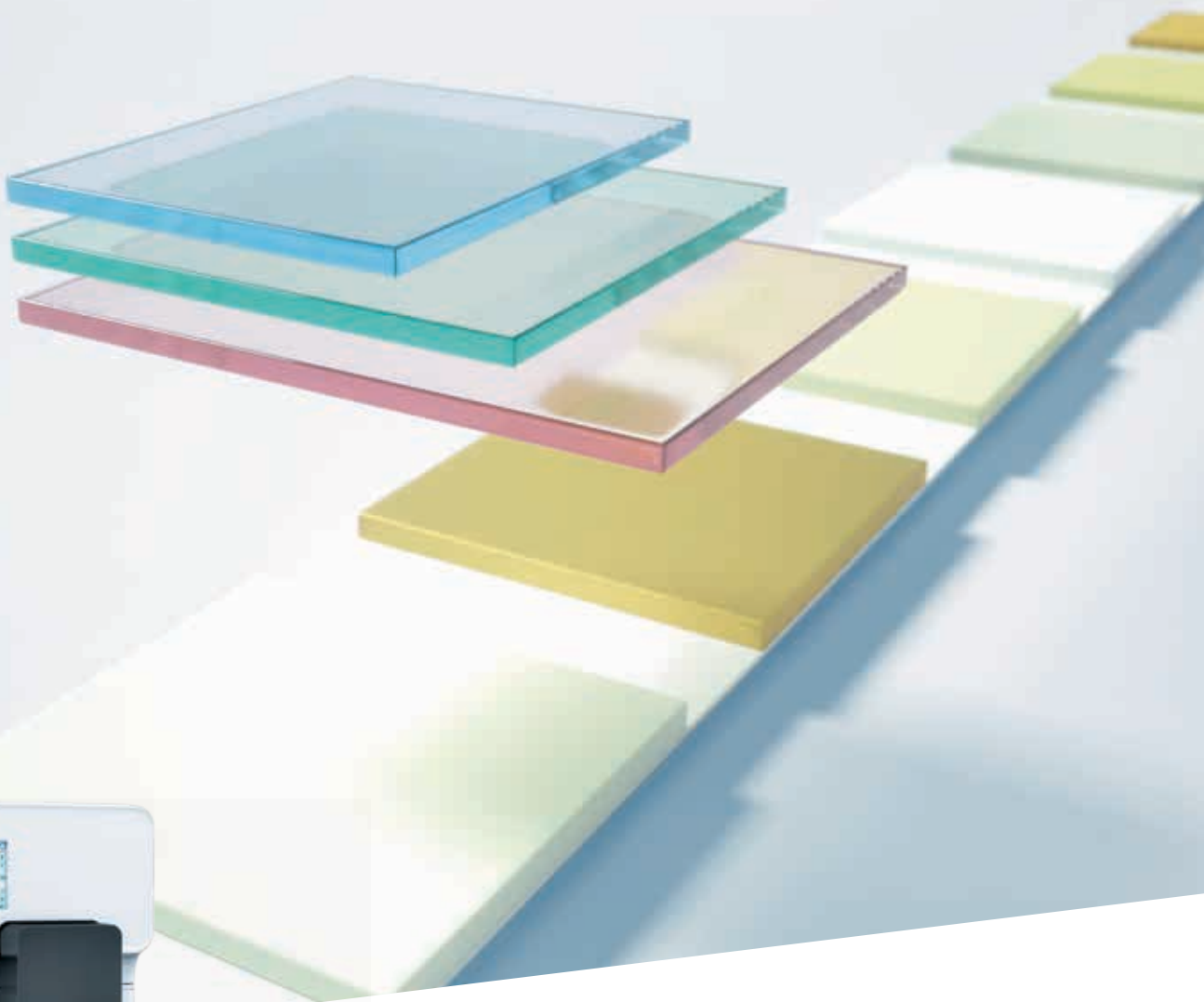

Vantaggi

Modularità e scalabilità



- La produttività del sistema può essere aumentata collegando più di un'unità UC-3500
- Il sistema può essere inserito nella configurazione integrata con gli analizzatori UF e UD

Tecnologia superiore

- Analisi rapida ed accurata
- Riconosce strisce errate e colore anomalo
- Distingue globuli rossi intatti ed emoglobina libera

Strisce reattive

- Disponibili due diversi tipi di strisce reattive (a 9 e 11 parametri)
- I test microalbumina e creatinina insieme sulla medesima stessa striscia

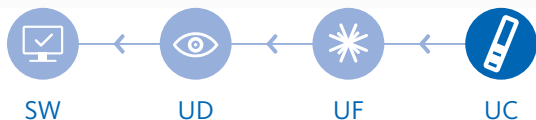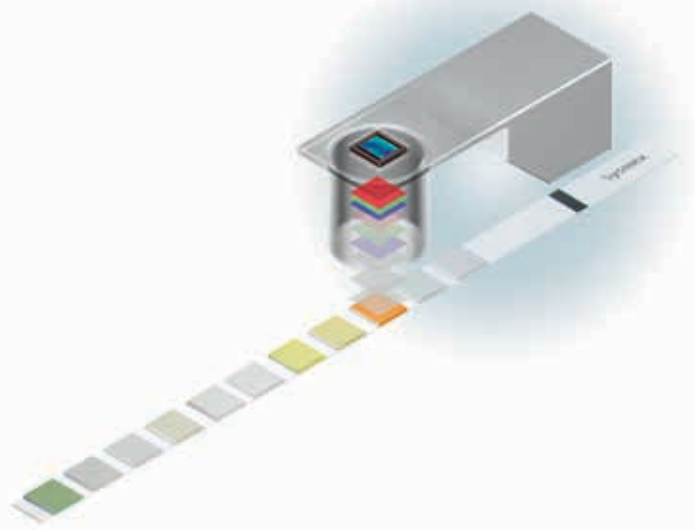

Caratteristiche tecniche

Tecnologia	Riflettanza fotometrica con fotocamera CMOS (strisce reattive) Rifrattometria - metodo di riferimento per il Peso Specifico
Strisce reattive	MEDITAPE UC-9A, MEDITAPE UC-11A
Parametri	
Parametri sulle strisce reattive	pH, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU, CRE (solo 11A), ALB (solo 11A)
Parametri eseguiti sul sistema	PS, colore, aspetto, ratio ALB/CRE (solo 11A), ratio PRO/CRE (solo 11A)
Produttività	max. 276 campioni/ora
Volume del campione	1 mL
Volume di aspirazione	230 µL
Capacità campionatore	80 campioni (8 rack con 10 provette ciascuno)
Opzioni	connessione con unità multiple di UC-3500, UF-5000/UF-4000 o UF-5000/ UF-4000 + UD-10; software gestionale di settore
Dimensioni/peso	unità principale campionatore incluso: L x A x P [mm/kg]
	circa 638 x 829 x 709/75

Design and specifications may be subject to change due to further product development.
Changes are confirmed by their appearance on a newer document and verification according to its date of issue.

© Copyright 2017 – DASIT S.p.A./Sysmex Europe GmbH

Distributore Italia: DASIT S.P.A.

Via R. Merendi 22, 20010 Cornaredo (MI), Italia · Telefono +39 02 93 9911 · Fax +39 02 93 991 390 · www.dasitdiagnostica.it

Rappresentante Legale: Sysmex Europe GmbH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germania · Telefono +49 40 52726-0 · Fax +49 40 52726-100 · info@sysmex-europe.com · www.sysmex-europe.com

Produttore: Sysmex Corporation

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Giappone · Telefono +81 78 265-0500 · Fax +81 78 265-0524 · www.sysmex.co.jp